

ELASTOMEERISEN INFUUSIOPUMPUN KÄYTTÖOHJE POTILAILLE




Lapin hyvinvointialue
Lapin korkeasteollisuus- ja
Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin puuterveystieteiden tutkimuskeskus

LAPIN AMK⁷
Lapland University of Applied Sciences

YLEISTÄ TIETOA

- Sinulle on aloitettu antibioottihoito.
- Antibiootti annostellaan kertakäyttöisellä ja sähköttömällä elastomeerisella infuusiopumpulla.
- Infuusiopumpun sisällä oleva kumipallo painaa lääkkeen ulos tasaisella nopeudella ja tyhjenee itsestään.
- Infuusio nopeus ja aika on valmiiksi määritetty ennen pumpun käyttöä.
- Saat lääkettä tasaisesti vuorokauden ajan.
- Infuusiopumppu on kiinnitetty koko infuusion ajan taittumattomalla letkulla katetriin. Letkua ei saa venyttää.
- Virtauksensäädin on teipattu ihoosi kiinni, joka turvaa lääkkeen virtaamisen oikealla virtausnopeudella.
- Infuusiopumpun mukana saat suojalaukun, jossa pumpua kannetaan.
- Infuusiopumpun voi laittaa väliaikaisesti myös taskuun, pöydälle tai muuhun sopivaan kantolaukkuun.
- Makuuasennossa oltaessa pumpun tulisi olla asetettuna samalle tasolle katetrin ulostuloaukon kanssa.

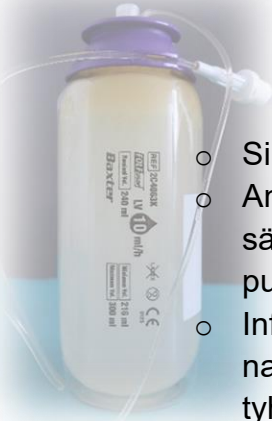

ARJESSA TOIMIMINEN INFUUSIOPUMPPUHOIDON AIKANA

- Pukeudu löysiin vaatteisiin.
- Saunomista ei suositella infuusiopumpun kanssa. (Lämpö lyhentää virtausaikaa.)
- Ulkoiluun liittyy paljon riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lääkkeen annostelu-aikaan: kuten sääilmiöt, auringonvalo sekä epätasainen liike.
- Huomioi kylmässä ilmassa lämmin pukeutuminen ja suojaa pumppu hyvin kylmältä. (Kylmyys pidentää virtausaikaa.)
- Suihkussa voi käydä, mutta katetrin ympärysihon teippaukset tulee suojata kastumiselta. Katetrin suojakalvojen pitää pysyä paikoillaan koko katetrin olo ajan ja hoitaja vaihtaa kalvot hoito-ohjeiden mukaisesti vähintään kerran viikossa.
- Pumppu kestää roiskevettä, mutta suihkun ajaksi pumppu olisi hyvä suojata, esim. muovipussilla. Laitetta ei tule upottaa veteen.

INFUUSIOPUMPUN TYHJENEMINEN

- Pumppu alkaa olla tyhjä, kun kumipallo pumppun sisällä tyhjenee.
- Pumppua ei pidä itse poistaa vaan antaa terveydenhuollon ammattilaisen tehdä se.
- Tyhjä pumppu ei ole vaaraksi, vaikka se on jonkin aikaa tyhjänäkin paikallaan.



ONGELMIEN SATTUESSA

- Ota yhteyttä hoitavaan tahoon, mikäli huomaa voimien huonontuneen tai
- Sinulle tulee allergisia oireita, kuten kutinaa, ihottumaa tai hengitysvaikeuksia.
- Alat oksentamaan tai ripuloimaan.
- Katetrin juuren iho alkaa punoittamaan ja kuumottamaan tai suojakalvo on irronnut.

Hoitavan yksikön yhteystiedot:
